
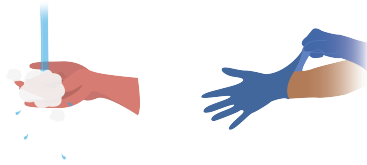


1 Vorbereitung

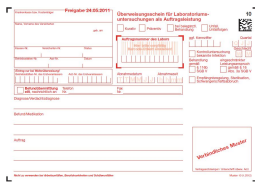

1. Hände für min. 30 Sekunden mit Seife waschen und gründlich abtrocknen
2. Gummihandschuhe anziehen (Erst am Ende von Schritt 3 wieder ausziehen!)

2 Beschriften

Überweisungs-
scheinAbstrichtupfer (in
Probenröhrchen)

1. Persönliche Daten auf Überweisungsschein kontrollieren. (Sollten die Angaben nicht korrekt sein, kontaktiere mail@coronaone.de)
2. Probenröhrchen mit Name und Geburtsdatum beschriften

3 Abstrich

(Erst vollständig durchlesen, dann durchführen!)



Holzspatel




Abstrichtupfer

Becher
(z.B. Kaffeetasse)

Mit Anleitung, Spatel, Tupfer und einem sauberen Becher vor einen Spiegel stellen. In der Tasse kannst du das Röhrchen abstellen
(Vorsicht: Der Tupfer im Röhrchen darf nur im Röhrchen abgelegt werden! Leg ihn niemals ungeschützt ab!)

Rachenwand

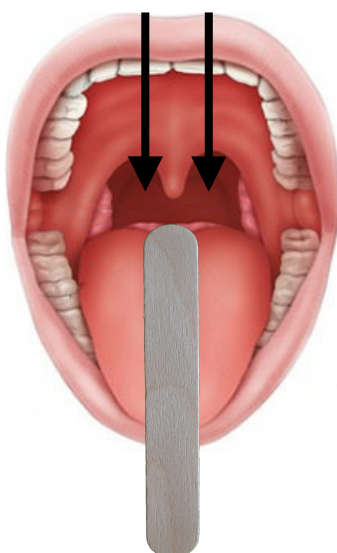

1. Anleitung neben einen Spiegel kleben (Klebefläche auf Rückseite nutzen), so dass sowohl die Anweisungen als auch das Spiegelbild gut zu sehen ist
2. Spatel auspacken, Abstrichtupfer entnehmen und leeres Probenröhrchen in Becher stellen
3. Zunge mit Spatel runter drücken
4. Abstrichtupfer tief bis hinter das Zäpfchen zur Rachenwand einführen (markierter Bildbereich) und **mit leichtem Druck 5x über Rachenwand streichen. Würgereiz und Husten sind normal.** Möglichst nicht Zähne und Zunge berühren
5. **Tupfer umgehend zurück in Probenröhrchen stecken und fest verschließen**

Check:

- Wurde Abstrich von Rachenwand und nicht vom Gaumen (vor dem Zäpfchen) genommen?
- Hat die Spitze des Abstrichtupfers sichtlich Feuchtigkeit aufgenommen?
- Ist Husten oder Würgereiz aufgetreten?


Wenn eins davon nicht eingetreten ist: Schritt 3 wiederholen.

Wenn es wiederholt nicht klappt, kontaktiere einen Arzt.

4 Verpacken



Kleinen Beutel und
Überweisungsschein
in großen Beutel

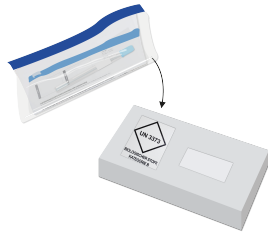

Großen Beutel in
Karton

1. Verschlussenes Probenröhrchen in den kleineren der beiden Beutel legen. Papiertuch nicht entfernen. Beutel einrollen, um Luft zu entfernen und sicher verschließen.
2. Überweisungsschein und kleinen Zip-Beutel in großen Beutel legen und auch diesen einrollen. **Roten Klebestreifen von Innenseite abziehen.** Klebende Fläche zuklappen um Beutel zu verschließen
3. Alles aus der Box nehmen.
4. Großen Probenbeutel in leere Kartonbox legen und Karton verschließen und zukleben
5. **UN3373 Etikett und Versand Etikett außen auf Karton kleben**

5 Kühlen bis zur Abholung



2-8°C

1. **Kartonbox bis zur Abholung im Kühlschrank lagern.** (Abholung, in der Regel, am nächsten Tag durch FedEx)
2. Alles übrig gebliebene Material und Handschuhe im Restmüll entsorgen